



cologuard[®]

CÓMO ENVIAR SU KIT

**SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
PARA ENVIAR SU KIT DE RECOLECCIÓN AL
LABORATORIO A TRAVÉS DE UPS.**

Si necesita ayuda, llámenos al 1-844-870-8870. Estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a sus preguntas.

**EXACT
SCIENCES**
LABORATORIES

www.cologuardtest.com

Solo con receta médica


LBL-10034rev6

La prueba de detección de cáncer colorrectal Cologuard[®] es marca registrada de Exact Sciences Corporation.

PREPARE SU KIT PARA EL ENVÍO



- a. Localice la etiqueta de envío de UPS en la parte superior del kit.
- Las etiquetas de envío del kit pueden ser diferentes a las de la imagen.
- b. Si la etiqueta de envío de UPS tiene una cinta desprendible verde, la debe quitar.
- Levante la esquina izquierda de la cinta desprendible y jálala.
 - Levante la orilla inferior de la etiqueta y jálala hacia arriba.
 - Quite la etiqueta superior del kit por la perforación.
 - Ahora podrá ver la etiqueta de envío.
 - Ya está listo para enviar su kit.
 - Continúe con el siguiente paso.
- c. Si la etiqueta de envío de UPS **no** tiene una cinta desprendible verde, entonces ya está listo para enviar su kit.

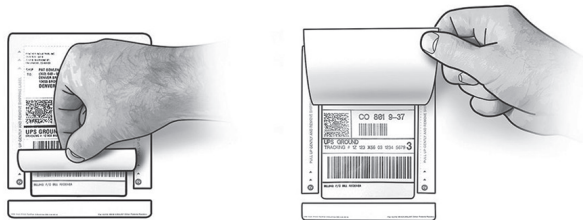

CÓMO ENVIAR SU KIT MEDIANTE UPS

Envíe sus muestras mediante envío prepagado de UPS en un plazo de un día desde la recolección, de modo que haya tiempo suficiente para que el laboratorio las reciba.

- El laboratorio **debe** recibir sus muestras lo antes posible para analizarlas satisfactoriamente.
- Nota: Asegúrese de que ningún feriado ni día domingo retrase su envío.

RECORDATORIO: CÓMO ALMACENAR SUS MUESTRAS ANTES DEL ENVÍO

Para almacenar la muestra antes de enviar la caja:

- Almacenar sus muestras selladas en la caja a temperatura ambiente.
- Mantenga las muestras alejadas del calor y la luz solar directa.
- Mantenga las muestras fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el kit en posición hacia arriba.

Si vive en Puerto Rico o en un territorio de los Estados Unidos, o tiene preguntas sobre cómo enviar sus muestras, comuníquese con nosotros llamando al 1-844-870-8870.

MANERAS DE ENVIAR SU KIT A TRAVÉS DE UPS

Tiene las siguientes opciones para enviar su kit mediante envío prepago de UPS:

- **Opción 1: Deje su kit** en cualquiera de las siguientes ubicaciones aprobadas de UPS. Visite www.ups.com para ver las ubicaciones físicas y sus horarios.
 - Tiendas de UPS
 - Centro para clientes de UPS
 - Oficina autorizada para envíos de UPS
 - Cualquier conductor de camión de UPS
- **Opción 2: Llame a UPS al 1-800-823-7459** para pedir que recojan su kit o preguntar sobre un lugar cerca de su domicilio para dejar la muestra (de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y la medianoche, y los sábados de 7:30 a. m. a 9:00 p. m., hora estándar del este).
 - Asegúrese de proporcionar el número de rastreo que se muestra en su etiqueta de envío prepagado, el que empieza con 1Z.
- **Opción 3: Programe la recogida en línea** visitando www.cologuardtest.com. En algunas zonas, no está disponible el servicio de recogida el mismo día. Para obtener más información, llame a UPS al **1-800-823-7459**.

Cuando haya enviado las muestras al laboratorio, habrá terminado.

El proveedor de atención médica se comunicará con usted para darle el resultado.